

# Bellovac® ABT

**YOUR OWN BLOOD**

Bellovac® ABT jest przeznaczony do autologicznej transfuzji własnej krwi pacjenta zebranej po operacji.

**Zamknięty, niskociśnieniowy zestaw do transfuzji pooperacyjnej składa się z:**

- Polietylenowego mieszka o poj. 220 ml z 2 zastawkami na wejściu i wyjściu, generującego podciśnienie 90 mmHg, z drenu łączącego o długości 115 cm z kłamarą i łącznikiem do dedykowanego drenu pooperacyjnego
- Wymennego worka na krew poj. 500 ml z zastawką antyzwrotną, z filtrem krwi 200µm, z odpowietrznikiem, portem na aparat do przetoczeń, łączenie zestawu z workiem na krew za pomocą nakrętki obrotowej
- Specjalnego aparatu do przetaczania krwi z filtrem maks. 40 µm, długa elastyczna komora kroplowa o długości w części przezroczystej o minimum 8,5 cm, igła biorcza typu lancet, zakrętka obrotowa zakończona zatyczką z filtrem hydrofobowym zabezpieczającym przed wyciekami
- Drenu pooperacyjnego typu Redon z trokarem, dł. 75 cm, w rozmiarach 10/14/18CH do wyboru.

**Zestaw pozwala na przeprowadzenie całej procedury autotransfuzji. Pakowany podwójnie, linia do przetoczenia posiada własne opakowanie.**

**Wszystkie komponenty są wolne od DEHP i szkodliwych ftalanów. Wykonane z biokompatybilnego, wolnego od pirogenów materiału.**



Nr. Ref	Bellovac® ABT zestaw
68306 2x10	Bellovac® ABT System 10 CH z trokarem
68307 2x10	Bellovac® ABT System 14 CH z trokarem
68308 2x10	Bellovac® ABT System 18 CH z trokarem

# Bellovac® ABT

## Akcesoria

### Zestaw do kontynuowania gromadzenia i przetoczenia krwi

Worek na krew poj. 500 ml z zastawką antyzwrotną, filtrem krwi 200um, odpowietrznikiem, portem na aparat do przetoczeń oraz specjalny aparat do przetaczania krwi z filtrem 40 um, długa elastyczna komora kroplowa o długości w części przezroczystej o minimum 8,5 cm, igła biorcza typu lancet, zakrętka obrotowa zakończona zatyczką z filtrem hydrofobowym zabezpieczającym przed wyciekami

Nr. Ref	Bellovac® ABT akcesoria
68309 4x5	Worek do autotransfuzji (500 ml) i aparat do transfuzji

### Zestaw dodatkowy umożliwiający drenaż z tkanki podskórnej

Dopasowany rozmiarem łącznik Y oraz dren typu Redon dł. 75 cm z trokarem stalowym w rozmiarach do wyboru 10/14/18 CH.

Nr. Ref	Bellovac® ABT akcesoria
68385 4x25	Łącznik-Y z drenem 10 CH i trokarem
68386 4x25	Łącznik-Y z drenem 14 CH i trokarem
68387 4x25	Łącznik-Y z drenem 18 CH i trokarem

### Linia przedłużająca

Długość min.175 cm, umożliwia tworzenie obiegu zamkniętego oraz gromadzenie i przetaczanie krwi bez konieczności rozłączania systemu i wymiany worków.

Nr. Ref	Bellovac® ABT akcesoria
68380 4x5	Linia przedłużająca

### Worek na drenaż przedłużony

Bezlateksowy wolny od PVC o poj. 700 ml wyposażony w zastawkę antyzwrotną i filtr hydrofobowy, do wyboru sterylny lub biologicznie czysty.

Nr. Ref	Bellovac® ABT akcesoria
68480 12x50	Worek na drenaż – sterylny
68337 12x50	Worek na drenaż – biologicznie czysty



Dystrybutor w Polsce

Skamex Spółka Akcyjna

93-121 Łódź  
Częstochowska 38/52  
info@skamex.com.pl

T: +48 42 677 14 11  
F: +48 42 672 40 10



Producent: Medioplast AB

P.O.Box 1004, SE-212 10 Malmö, Sweden  
Bronsåldersgatan 2, SE-213 76 Malmö  
T: +46 40 671 23 00  
mediplast.info@mediplast.com

v.1.05032024

# Bellovac® ABT

YOUR OWN BLOOD™

**Bellovac® ABT jest przeznaczony do autologicznej transfuzji własnej krwi pacjenta zebranej po operacji.**

## Zacisk wlotowy

Zacisk bezpieczeństwa dla łatwej obsługi jedną ręką.

## Trzy zastawki antyzwrotne

W celu ochrony pacjenta i personelu Bellovac® ABT jest wyposażony w trzy zastawki antyzwrotne, po jednym na wlocie i wylocie z mieszka oraz w worku do autotransfuzji.

## Mieszek ssący

Mieszek ssący można napęczyć maksymalnie do 220 ml. Mieszek pracuje przy początkowym podciśnieniu 90 mmHg/12 kPa.


## Zacisk wylotowy

Zacisk bezpieczeństwa ułatwiający obsługę jedną ręką.

## Podwójna filtracja

W worku do autotransfuzji znajduje się makrofiltr 200 µm, a w zestawie do transfuzji mikrofiltr 40 µm

Wszystkie komponenty są wolne od DEHP i wykonane z biokompatybilnego, wolnego od pirogenów materiału.

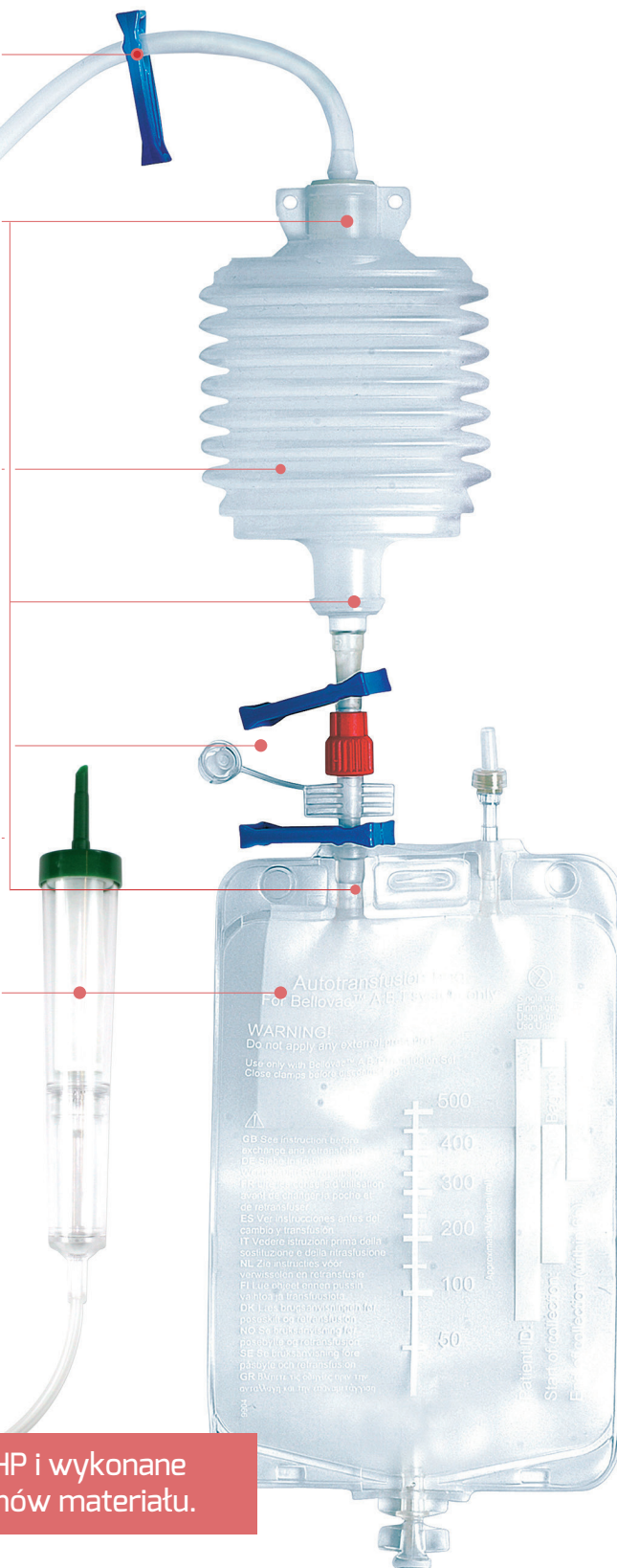

# Bellovac® ABT

YOUR OWN BLOOD™

**Bellovac® ABT jest przeznaczony do autologicznej transfuzji własnej krwi pacjenta zebranej po operacji.**



#### Kompletny i gotowy do użycia

System Bellovac® ABT jest dostarczany kompletny i sterylizowany, gotowy do użycia w celu pobrania i reinfuzji jednej jednostki autologicznej krwi.

#### Ref. no.

68306 2x10  
68307 2x10  
68308 2x10

#### Bellovac® ABT zestaw

Bellovac® ABT System FG 10 z trokarem  
Bellovac® ABT System FG 14 z trokarem  
Bellovac® ABT System FG 18 z trokarem



#### Companion System do dodatkowego pobierania i reinfuzji

W przypadku utraty przez pacjenta więcej niż jednej jednostki krwi (500 ml) można zastosować ten towarzyszący system składający się z jednego worka do autotransfuzji i jednego aparatu do transfuzji.

#### Ref. no.

68309 4x5

#### Bellovac® ABT akcesoria

Worek do autotransfuzji (500 ml) i aparat do transfuzji



#### Linia przedłużająca

Służy do zapewnienia, że krew pacjenta nigdy nie opuści obiegu zamkniętego

#### Ref. no.

68380 4x5

Linia przedłużająca



#### Worek na drenaż

Sześć godzin po operacji kończy się faza pobierania krwi i do kontynuowania drenażu rany stosuje się standardowe worki drenażowe

#### Ref. no.

68337 12x50  
68480 12x50

Worek na drenaż – wolny od PVC



Dystrybutor w Polsce

Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

93-121 Łódź  
Częstochowska 38/52  
info@skamex.com.pl

T: +48 42 677 14 11  
F: +48 42 672 40 10

#### Akcesoria

Y-łącznik i dren FG 10  
Y-łącznik i dren FG 14  
Y-łącznik i dren FG 18  
Y-łącznik i dren FG 10 z trokarem  
Y-łącznik i dren FG 14 z trokarem  
Y-łącznik i dren FG 18 z trokarem

#### Ref. No

68376 4x25  
68377 4x25  
68378 4x25  
68385 4x25  
68386 4x25  
68387 4x25